

OLYMPUS[®]

Your Vision, Our Future

内視鏡用送水ポンプ

OFP-2

診断と治療を幅広くサポートする、コンパクトな送水ポンプ。




鉗子チャンネルと副送水チャンネルのどちらにも送水可能。
 スコープの視野を簡単・迅速に確保。
 よりスムーズな診断・治療をサポートします。



鉗子チャンネル、副送水チャンネル両対応

■ 鉗子チャンネルと副送水チャンネルどちらにも接続できるため、粘膜面の洗浄、超音波内視鏡使用時の注水など、幅広い用途に使用が可能です。

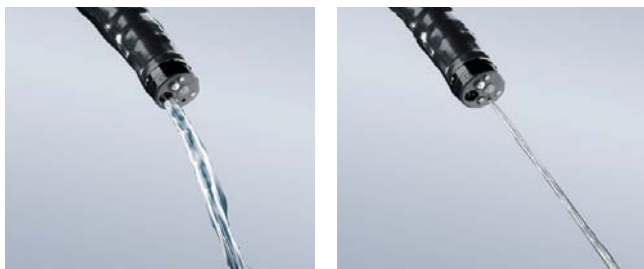

細かな流量コントロールと、高い操作性

- 「送水量設定スイッチ」へのタッチ操作で、電子制御による細かな流量コントロールを実現します。
- 明るいLED表示の「送水量インジケータ」で、選択された設定の確認が容易です。
- 付属のフットスイッチからの送水操作に加え、スコープ操作部からのリモートコントロールも可能です。



仕様

送水	方式	ロータリー式
	流量	副送水チャンネル：約230ml/分 鉗子チャンネル：約785ml/分 (φ3.2mm) ※いずれも OFP-2 本体のポンプヘッドが新品状況の測定値の目安である。またチャンネルの太さや長さによって異なる。
大きさ	質量	4kg (送水タンクが空のとき)
	寸法	244mm (幅) × 166mm (高さ) × 385mm (奥行) 送水タンク搭載時 244mm (幅) × 220mm (高さ) × 385mm (奥行)
使用環境	電源	100V 交流
	周波数	50/60Hz
	消費電力	100VA
	電圧変動率	±10%
	周囲温度	+10℃～+40℃
	相対湿度	最高温度40℃で93% (ただし結露しないこと)
	気圧	70kPa～106kPa

標準セット

OFP-2	内視鏡用送水ポンプ	1
	電源コード	1
	フットスイッチ	1
	送水タンク	1

安心と安全を迫及した機能

- スタンバイモードを搭載し、メインスイッチを操作することなく、迅速・安全な送水チューブの交換が可能です。
- 送水チューブには送水タンク挿入位置とポンプヘッド取付位置を示すインジケータライン、送水方向を示す矢印を印字し、正確な取り付けをサポートします。
- 体腔内の必要以上の加圧を防ぐポンプヘッド自動停止機能により、20秒間で自動的に送水を停止します。

容量をアップさせた送水タンク

- 2リットルのタンク容量で、充填回数を低減。残量を把握しやすい水量レベルのマーク付き。
- 独自構造の蓋は、送水チューブの差し込み操作を簡便化。
- 送水タンクと蓋はオートクレーブ滅菌対応。



MAJ-1603

耐性が高く、安定した送水をサポート

- 送水チューブとアダプターは滅菌済みディスポーザブルのため、開梱後すぐに使用できます。
- 鉗子チャンネル用のアダプターと送水チューブは単回使用のため感染リスクを低減します。
- 副送水チャンネル用の送水チューブは1日使用のため手術毎のコストを低減します。

鉗子チャンネル用



MAJ-1606

副送水チャンネル用



MAJ-1607



MAJ-1608



MAJ-855

別売アクセサリ

型番	製品名	備考
MAJ-1603	送水タンク (3 個入)	容量2L、オートクレーブ滅菌対応
MAJ-920	ポンプリモートケーブル	CV-260/260SL と接続しスコープスイッチから送水操作可能
鉗子チャンネル送水で使用		
MAJ-1606	鉗子チャンネルアダプター (100 個入/10 個入)	滅菌済みディスポーザブル (単回使用)
MAJ-1607	鉗子チャンネル用チューブ (50 本入/10 本入)	チューブ長2,500mm、滅菌済みディスポーザブル (単回使用)
副送水チャンネル送水で使用		
MAJ-1608	副送水チャンネル用チューブ (50 本入/10 本入)	チューブ長750mm、滅菌済みディスポーザブル (一日毎に交換)
MAJ-855	副送水チューブ (1 本)	副送水機能付きスコープに付属、オートクレーブ滅菌対応

販売名	医療機器認証番号
OFP-2：内視鏡用送水ポンプ	221ABBZX00157000号

販売名	医療機器製造販売届出番号
MAJ-1603：送水タンク	13B1X00277000358号
MAJ-1606：鉗子チャンネルアダプター	13B1X00277000332号
MAJ-1607：鉗子チャンネル用チューブ	13B1X00277000333号
MAJ-1608：副送水チャンネル用チューブ	13B1X00277000394号
MAJ-855：副送水チューブ	13B1X00277000283号

● 仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



オリンパス メディカル システムズ株式会社
 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モリリス
www.olympus.co.jp

取扱販売店名

Olympus Customer Information Center Endoscope
 内視鏡お客様相談センター

0120-41-7149
 ※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。